


12



13

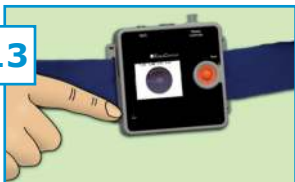

14



MOVIMENTO (PLM)

- Coloque o sensor no tornozelo ou pulso (12).
- Fixe o cabo com adesivo hipoalergénico (12).
- Ligue o conector colorido **cinzento-claro** à entrada "Aux" (12 a) e (8).

INÍCIO DO EXAME (MODO MANUAL)

- Prima e mantenha premido o botão ON/OFF (ligar/desligar) até que o dispositivo fique ligado (13).
- Prima o joystick para iniciar o exame. Uma luz sob o ecrã fica intermitente para confirmar que o exame começou (14).

FIM DO EXAME (MODO MANUAL)

- Mantenha premido o botão ON/OFF (ligar/desligar) até que a mensagem "A DESLIGAR" apareça no ecrã (13).

INÍCIO E FIM DO EXAME (MODO AUTOMÁTICO)

- O dispositivo pode ser programado para iniciar e terminar o exame a uma hora específica. Nesse caso, o início e fim do exame serão automáticos.

O paciente deve ler ou ser informado das advertências e precauções descritas no manual do usuário.

Em testes domiciliares, é altamente recomendável que a colocação dos sensores seja realizada por profissionais de saúde. Se for feito pelo próprio paciente, em caso de dúvida, contate o pessoal de saúde.

No caso de provas realizados em casa, é altamente recomendável que a colocação dos sensores seja realizada por profissionais de saúde. Se o procedimento for levado a cabo pelo próprio paciente, em caso de dúvida, contactar os profissionais de saúde, durante a prova.


CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE

- O dispositivo tem de ser **transportado** na mala de transporte facultada e nas seguintes condições:
T: entre -20 e 60 °C. H: < 90% sem condensação
- As condições de **utilização** têm de ser:
T: entre 5 e 40 °C. H: entre 15 e 90% sem condensação
P: entre 700 e 1060 hPa (entre 3000 e -380 m aprox.)

INSTRUÇÕES ADICIONAIS

Sibelmed

Guia de iniciação rápida

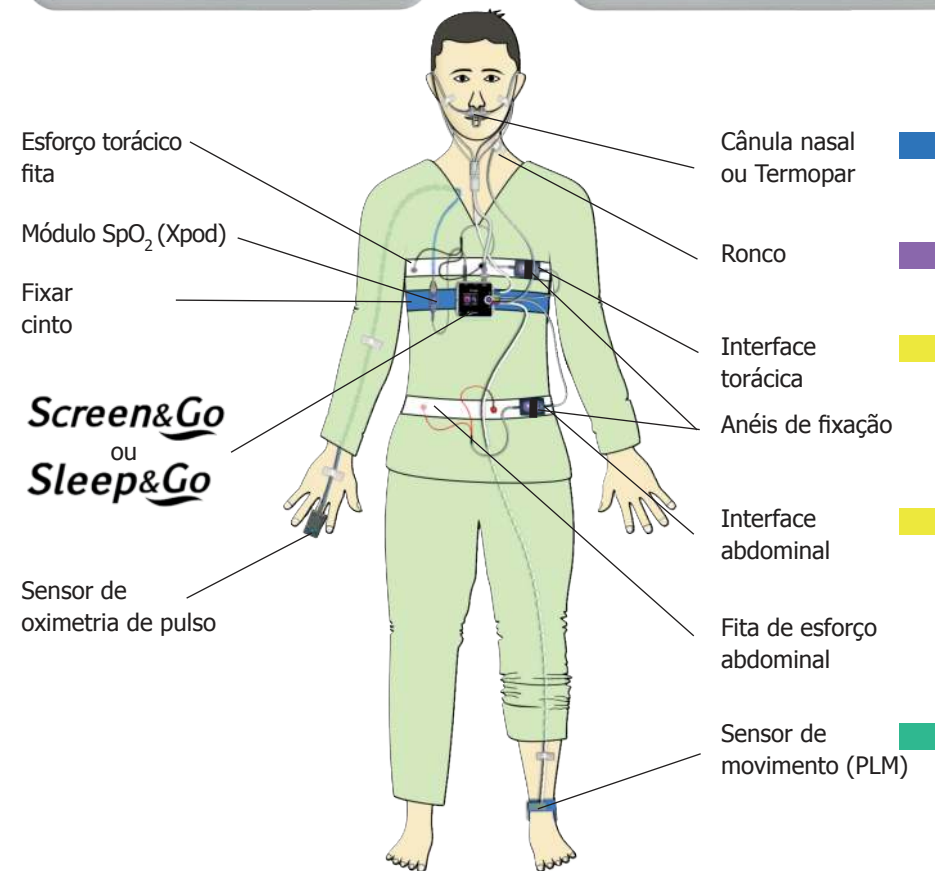

Esforço torácico
fita

Módulo SpO₂ (Xpod)

Fixar
cinto

Screen&Go
ou
Sleep&Go

Sensor de
oximetria de pulso

Cânula nasal
ou Termopar

Ronco

Interface
torácica

Anéis de fixação

Interface
abdominal

Fita de esforço
abdominal

Sensor de
movimento (PLM)

CE 0318

SIBEL S.A.U.

Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.

Vendas nacionais: Tel. 93 436 00 08 · e-mail: comercial@sibelmed.com

Vendas internacionais: Tel. +34 93 436 00 07 · e-mail: export@sibelmed.com

Serviço pós-venda: Tel. +34 93 433 54 50 · e-mail: sat@sibelmed.com

www.sibelmed.com

Sibelmed



534-7AB-GR5 Rev. 2.01 - 2024-05



Manual do usuário incluído em formato PDF. Solicite uma cópia impressa, se necessário.

1





2




CÂNULA NASAL

- Coloque a cânula nasal tal como indicado na imagem (3). Use adesivo hipoalergénico para fixar a cânulas às bochechas.
- Ligue a cânula à entrada "Nasal cannula" e rode-a até estar bem fixada (3a).
- Posicionar abaixo do queixo (3b).

4

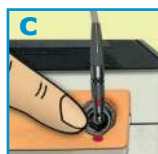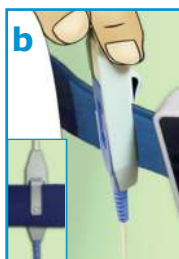


5

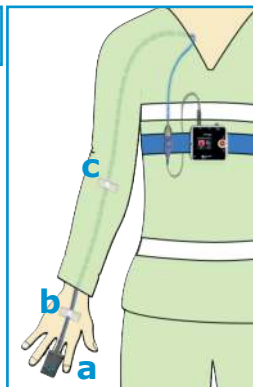

CINTO DE FIXAÇÃO

- Passe o cinto de fixação pela lateral do dispositivo, dobrando e prendendo o cinto ao próprio (1).
- Coloque o dispositivo entre o abdómen e o tórax, e passe o cinto em redor do corpo.
- Passe a outra extremidade do cinto pelo outro lado do dispositivo e ajuste-o de forma a ficar bem preso. (2).

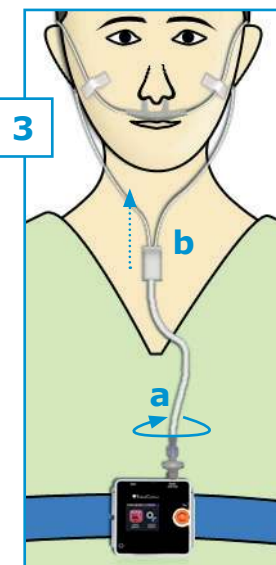


PULSOXIMETRIA

- Com o sensor de oximetria de pulso ligado ao Xpod, ligue o Xpod à peça tipo clipe (4a) e prenda-o à fita, com o cabo comprido do sensor virado para cima (4b).
- Ligue o cabo curto do Xpod ao conector "SpO₂" do dispositivo, fazendo corresponder ambas as marcas vermelhas (4c).
- Introduza o dedo indicador ou médio no sensor até ao limite (5a).
- Prenda o cabo à mão e antebraço com adesivo (5b e 5c).


Nota:

- É recomendável que o cabo seja colocado ao longo do braço por dentro do pijama.


6

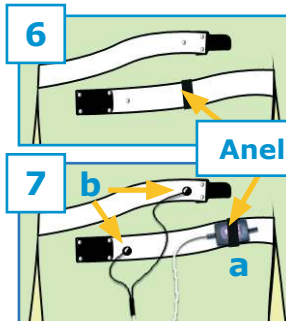


7

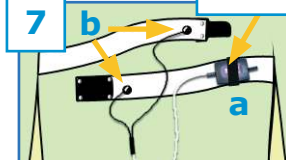

8

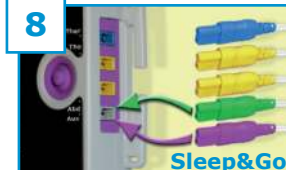

9

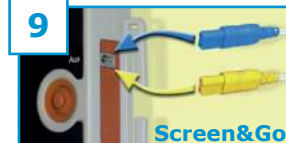

FITAS DE ESFORÇO

- Ajuste as fitas de esforço em redor do peito e / ou abdómen, passando previamente os anéis de fixação (6).
- Segure a caixa marcada como "Chest" (interface do peito) à fita do peito com velcro e fixe-a com o anel de fixação (7a).
- Proceda da mesma forma com a caixa marcada "Abd" (interface abdominal) na fita de esforço abdominal.
- Ligue os conectores tipo "clipe" aos ganchos da fita correspondente (7b).
- Ligue as caixas ("Chest" e / ou "Abd") às entradas "Tho" e / ou "Abd" (conector amarelo). (8).

Nota:

- No Screen&Go, ligue a caixa ("Chest" ou "Abd") à entrada "Aux" (conector cinzento-claro) (9).


FLUXO DE AR TERMOPAR

- Coloque o sensor do termopar no lábio superior. Dobre os dentes (10b), de forma a que as extremidades fiquem viradas para a narina, mas sem tocar na pele. Fixe os fios às bochechas com adesivo hipoalergénico (10).
- Dobre o tubo oral (10c) em frente à boca, sem tocar na pele ou nos lábios.
- Ligue o sensor à entrada do dispositivo (10a):
 - "Ther" (conector azul) no Sleep&Go (8)
 - "Aux" (conector cinzento-claro) no Screen&Go

(9)

RONCO

- Coloque o sensor na parte do pescoço abaixo da bochecha (não diretamente sobre a laringe).
- Fixe com adesivo hipoalergénico (11b).
- Ligue o sensor à entrada "Aux" (conector cinzento-claro) (11a) e (8).

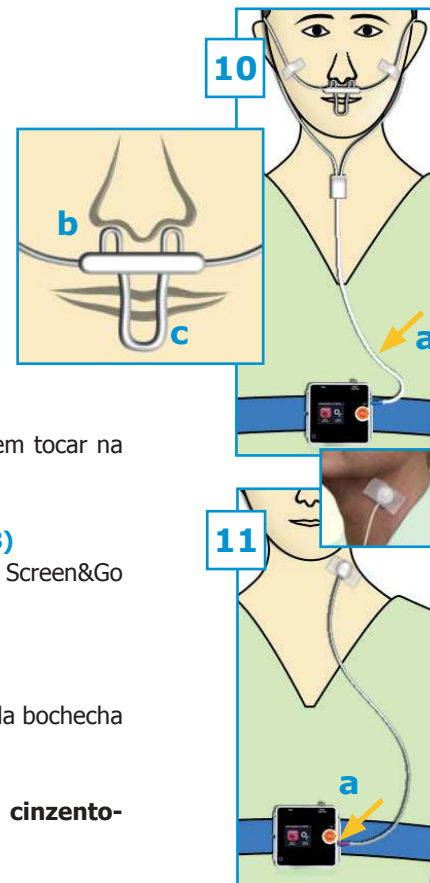

11

