

Sibelmed®

Polygraphie de dépistage pour un diagnostic simplifié du sommeil.

Screen&Go

Dépistage du SAHS

CE 0318



Polygraphe domestique



8 canaux



Signaux en temps réel sur l'écran



Utilisable en pédiatrie

Recommandations de l'AASM et GES

Screen&Go · Dépistage du SAHS

El **Screen&Go** Il s'agit d'un polygraphe de dépistage à 8 canaux qui enregistre les signaux nécessaires pour effectuer un diagnostic simple, rapide et fiable lors de la réalisation de tests de sommeil à domicile.

A été mis au point par le département de R&D+i de **SIBELMED**, se conformer à les recommandations de l'AASM et GES.



≥ 5 années



Solide et léger



Écran graphique couleur



Contrôle de qualité des signaux sur l'écran



Jusqu'à 7 canaux simultanés



Informations sur l'état du système sur l'écran



Peut être utilisé en pédiatrie



Logiciel BitmedLab inclus



Canal de position intégré



CANAL DE POSITION INTÉGRÉ:

Screen&Go est équipé d'un capteur interne qui enregistre des informations sur la position du corps du patient et l'actigraphie



EN TEMPS RÉEL SUR L'ÉCRAN:

vous permet de visualiser les signaux enregistrés sur l'écran en temps réel. Cela permet au patient de s'assurer que tous les canaux sont correctement connectés et que le test est correctement effectué.




TESTS PROGRAMMABLES DEPUIS LE PC ET L'APPAREIL:

Jusqu'à 5 tests consécutifs peuvent être programmés, directement sur l'appareil ou sur PC, à l'aide du logiciel BitmedLab.



GARDE EN MÉMOIRE UN NOMBRE DE NUITS ILLIMITÉ:

Permet de garder en mémoire autant de nuits que vous le souhaitez, car sa capacité n'est pas limitée, du fait que les tests sont enregistrés sur une carte mémoire externe.

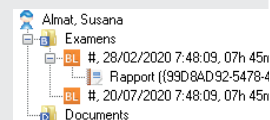

Canaux

- Débit respiratoire par canule nasale
- Ronflement par canule nasale
- Thermocouple
- Bande inductive thoracique
- SpO2
- Pouls (BPM)
- Position
- Activité

Événements

- Apnées (obstructive, centrale et mixte)
- Hypopnées
- Désaturation
- Ronflement
- Limitation du débit

Screen&Go · Dépistage du SAHS

Logiciel BitmedLab

Screen&Go de série comprend BitmedLab, est un logiciel simple et intuitif qui permet l'affichage et l'examen des signaux du sommeil et l'analyse des événements respiratoires.

BitmedLab est conforme aux recommandations de l'AASM (Académie américaine de médecine du sommeil) et compatible avec toute la gamme de polygraphes SIBELMED:



Détection automatique

De l'appareil associé



Multiples options d'affichage

Telles que la couleur et la largeur des tracés, la configuration des marques d'événement, l'ajout de notes...



Graphique de gravité IAH

Dans les rapports



Rapport personnalisé

De l'étude du sommeil



Base de données intégrée

Pour la gestion des patients et des tests



Exportation de données

Aux formats PDF et XML




Système d'exploitation


Windows, 7, 8.1, 10 et 11



Écran initial

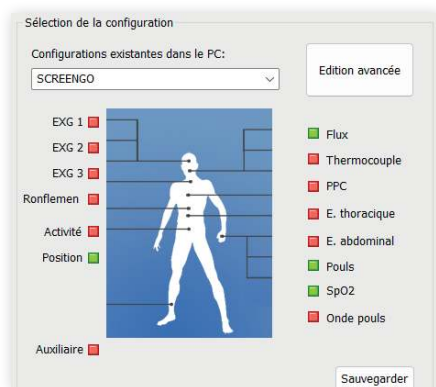


Configuration des canaux

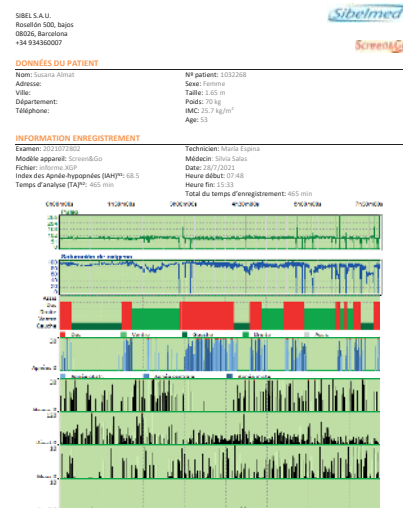

Rapport graphique de l'IAH

ANALYSE MANUELLE OU AUTOMATIQUE DES ÉVÉNEMENTS:

Le technicien peut marquer manuellement les événements ou utiliser la fonction d'analyse automatique du logiciel, qui indiquera automatiquement les événements détectés pendant l'étude du sommeil.

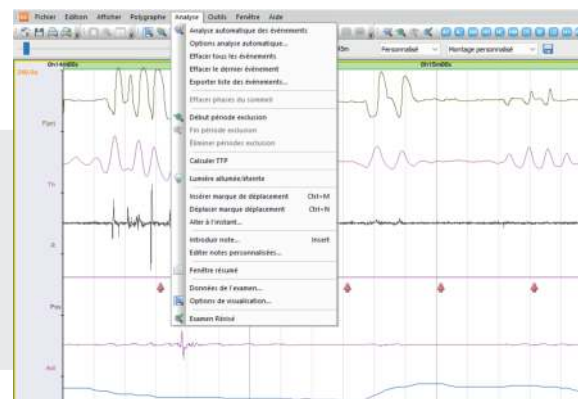

Screen&Go · Dépistage du SAHS

Spécifications techniques

Type	Polygraphe de type IV
Nombre de canaux	1-8 (7 simultanés)
Dimensions	86 x 86 x 24 mm
Poids	125 g (sans piles)
Batterie interne	2 piles AA alcalines/rechargeables NiMH.
Autonomie	4 études de 8 heures
Mémoire	Micro SD. Maximum 2 Go (>1500 études de 8 heures) Micro SD HC. Max. 16 Gb (>12000 études de 8 heures)

Modèles

Screen&Go Configuration A CANAUX	Screen&Go Configuration B CANAUX
Débit respiratoire par canule nasale	Débit respiratoire par canule nasale
Ronflement par canule nasale	Ronflement par canule nasale
SpO ₂	SpO ₂
Pouls (BPM)	Pouls (BPM)
Canal de position	Canal de position
Canal d'activité	Canal d'activité
--	Bande thoracique

Standard

- 20021 Screen&Go Conf. A:
Comprend: Screen&Go (09895), Flux par canule, Ronflement par canule nasale (08078), Module d'oxymétrie de pouls Xpod (09898), Capteur d'oxymétrie de pouls souple (08955), Support Xpod (08556), canal de position (08079), canal d'activité (08080).
- 20022 Screen&Go Conf. B:
Comprend: Screen&Go (09895), Flujo por cánula, Ronquido por cánula (08078), Module d'oxymétrie de pouls Xpod (09898), Capteur d'oxymétrie de pouls souple (08955), Support Xpod (08556), Canal posición (08079), canal actividad (08080), Interface d'extension jauge de contrainte thoracique inductive (06314), sangle inductive élastique extra large (XL) (01420), anneau de fixation (07678).
- 06312 Bande de fixation, grande taille (L)
08060 Carte mémoire SD avec adaptateur SD
08094 Lecteur de carte mémoire USB pour PC
03673 2 piles alcalines AA 1,5 V
08010 Valise de transport
Manuel d'utilisation et guide de démarrage rapide Screen&Go

En option

- 06309 Capteur thermocouple et activation du canal (09880)
08049 Canule nasale à usage unique
06311 Bande de fixation, petite taille (S)
06313 Bande de fixation, extra large (XL)
01424 Bande inductive élastique, taille moyenne (M)
01425 Bande inductive élastique, petite taille (S)
01421 Bande inductive élastique, grande taille (L)
01420 Bande inductive élastique, extra large (XL)
01417 Bande inductive élastique, extra extra large (XXL)
08956 Capteur d'oxymétrie de pouls pédiatrique



Sleep&Go



Polígrafo cardiorrespiratorio

Polygraphe de type IV 16 canaux pour un diagnostic avancé du sommeil: Débit respiratoire de la canule nasale, ronflement de la canule nasale, thermocouple, bande inductive thoracique, SpO₂, pouls (BPM), position, activité, niveau CPAP, bande inductive abdominale, mouvement des membres, ronflement externe, module ExG externe (3 canaux), onde de pouls et Bluetooth (en temps réel).

SIBEL,S.A.U. Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelgroup.com
Ventas Internacionales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelgroup.com
Serv. Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelgroup.com
www.sibelmed.com


Positional Therapy
somnibel®



Votre solution pour le ronflement positionnel et l'apnée

Thérapie posturale qui, fixée sur le front, applique une légère vibration pendant que le patient dort en décubitus dorsal pour l'inciter à changer de position, réduisant ainsi l'incidence des apnées du sommeil et/ou du ronflement positionnel.

Dispositif **SomnibelPro®**:
Comprend SomniLab, le logiciel permettant au professionnel d'analyser les nuits du patient.

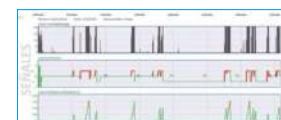

Le produit est conforme au:
Règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745
EN ISO 9001:2015 EN ISO 13485:2016+A11:2021