

Sibelmed

**MEDIDOR DE FLUJO
MISURATORE DI
PICCO DI FLUSSO**



- **Bajo coste**
 - Basso costo
- **Control domiciliario**
 - Test domiciliare
- **Zona de colores para el control del Asma**
 - Zone colorate per il controllo dell'asma
- **Personalizable**
 - Personalizzabile
- **Normativa Europea EN ISO 23747**
 - Normativa Europea EN ISO 23747



www.sibelgroup.com

Creiamo il futuro

DATOSPIR PEAK-10 • misuratore di picco di flusso

Principales características

El medidor de flujo espiratorio DATOSPIR PEAK-10 mide la intensidad del flujo de aire que pasa por las vías aéreas cuando se realiza una espiración lo más rápida e intensa posible. El nivel de la cifra alcanzada informará al médico sobre el grado de gravedad de su enfermedad.

Incorpora una sencilla herramienta de autocontrol para el paciente (el semáforo). El establecimiento de las distintas zonas debe ser elaborado por personal médico y será individualizado para cada paciente.

Este equipo ha sido verificado y calibrado en SIBEL,S.A según el procedimiento y verificación de ajuste.



Herramienta de autocontrol (semáforo) / Sistema a zone colorate

Especificaciones Técnicas / Caratteristiche tecniche

Rango/Intervallo: 60-900 l/min. (EN ISO 23747).

Incremento Escala/Incremento scala: 10 l/min.

Exactitud/Precisione: $\leq \pm 10\%$ o < 20 l/min.

Calibración/Calibrazione: 100% (individuale).

Repetibilidad/Ripetibilità: $\leq \pm 5\%$ o < 10 l/min.

Respuesta en frecuencia/Risposta in frequenza:

Según la normativa EN ISO 23747 / Secondo la normativa EN ISO 23747.

Cumple las recomendaciones de la ATS/ERS 2005 (Eur Respir J 2005; 26:948-968) y la norma EN ISO 23747 / Lo strumento è conforme alle direttive ATS/ERS 2005 (Eur Respir J 2005; 26:948-968) e alla normativa EN ISO 23747

Producto clase I con función de medición según Directiva 93/42/CEE


Prodotto di classe I con funzioni di misurazione secondo la direttiva 93/42/CEE

Caratteristiche principali

Il misuratore di picco di flusso DATOSPIR PEAK-10 fornisce una misurazione oggettiva del picco di flusso espiratorio (PEF) e rappresenta un'informazione preziosa circa le funzionalità polmonari. L'uso corretto dello strumento offrirà un valido aiuto al medico nel valutare attentamente la patologia del paziente, permettendogli di individuare il trattamento più indicato.

Il sistema a zone colorate è molto utile nel monitoraggio delle patologie respiratorie del paziente. I limiti delle zone devono essere stabiliti da un medico e il dispositivo deve essere personalizzato per ciascun paziente.

Il dispositivo è stato verificato e calibrato in SIBEL, secondo la procedura standard di verifica e regolazione.

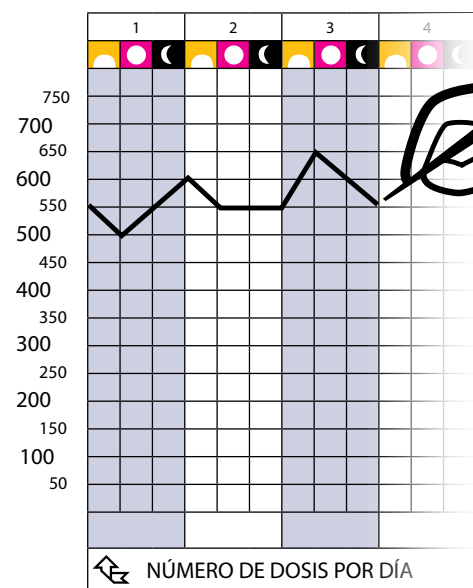

SIBEL S.A.U., Rosellón 500 bajos, 08026 BARCELONA (Spain)
Uff. vendite nazionali: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com
Uff. vendite internazionali: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com
Assistenza tecnica: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com Fax: +34 93 436 16 11



Sibel è membro di HL7 Spagna



CE0318 EN ISO 23747:2009 EN ISO 13485:2012+AC:2012