

USB SIBELMED · estação meteorológica

Descrição

A Estação Meteorológica **USB Sibelmed** permite medir os dados meteorológicos de temperatura, pressão e humidade com grande precisão.

	Limites	Precisão (%)
Temperatura (°C)	5 - 40	+/- 0,2
Pressão (hPa)	250 - 1060	+/- 1,5
Humidade (% HR)	10 - 90	+/- 2

A estação meteorológica USB Sibelmed é conectada à porta USB do computador e envia os dados meteorológicos de forma contínua.

É compatível com o software W20s e, por isso, com todos os espirómetros Sibelmed.

O software recolhe os dados da estação de forma automática cada vez que é realizada uma espirometria ou uma calibração.

Tecnologia Plug & Play.

O software deteta automaticamente a estação meteorológica, sem ser necessária instalação nem configuração.



Portátil

Acessório leve e pequeno que dispõe de uma superfície magnetizada para colocação na superfície do computador.



Obtenção da pressão, temperatura e humidade

Correção automática BTPS no início de cada exame/calibração.



LED azul

Indica que a estação meteorológica está em funcionamento.

Não necessita de pilhas

Alimentação por cabo USB.



Compatível

Com a versão 2.09 do software W20s e posteriores.



Válido para o sistema operativo Windows

VISTA, 7, 8.1 e 10.



SIBEL S.A.U., Rosellón 500 bajos, 08026 BARCELONA (Espanha)
Vendas nacionais: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com
International Sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com
Serviço Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com Fax: +34 93 436 16 11
www.sibelmed.com



CE

EN 61010-1:2010

EN ISO 9001:2015




Sibelmed®

**ESTAÇÃO METEOROLÓGICA
USB
SIBELMED**



USB

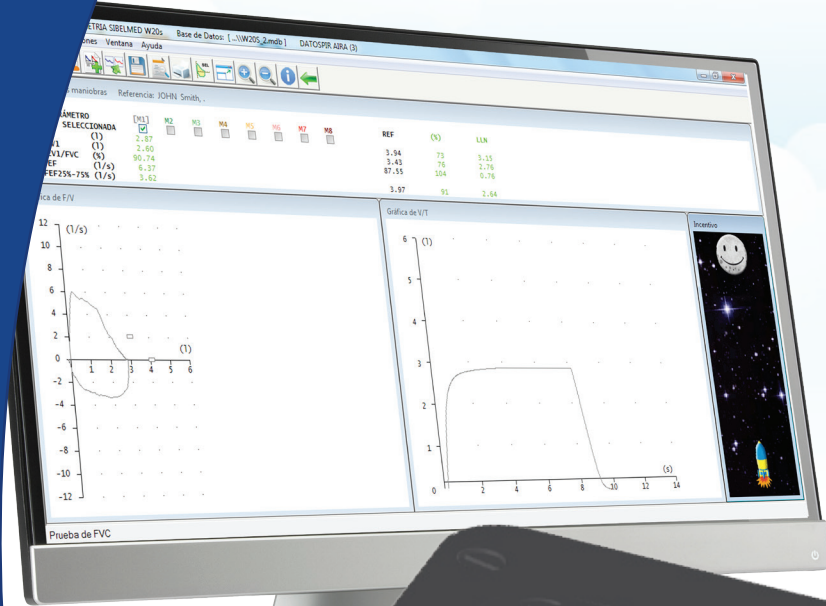

 34 x 70 x 12,5 mm

 100 g



Temperatura



Pressão



Humidade

www.sibelmed.com