

U310

ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL



En cualquier lugar. En cualquier momento.

El Analizador de Composición Corporal Chorder U310 ofrece un sistema de medición corporal completo en un dispositivo portátil, aumentando la accesibilidad y la comodidad! Los resultados se sincronizan con la aplicación Chorder ProScan para tantos usuarios como se necesite, lo que facilita la gestión de los resultados.



Escaneo Rápido



Análisis segmentado



Usuarios ilimitados



Prueba en cualquier lugar

Interfaz intuitiva y fácil de usar

Emparejamiento automático del dispositivo

¡Crear nuevas cuentas de usuario es rápido y sencillo con la aplicación Charder ProScan!

Después de seleccionar al usuario, presiona el botón de medición para transferir su perfil al dispositivo y así lograr un emparejamiento y medición automáticos.

El escaneo corporal completo se realiza en aproximadamente 30 segundos, con el progreso claramente indicado en la pantalla LCD.

Los resultados se guardan automáticamente en la aplicación al finalizar, divididos en varios módulos fáciles de usar para una gestión y seguimiento de resultados más convenientes.



Resultados clave de la composición corporal



Composición Corporal

Recibe resultados sobre el agua corporal, masa ósea y mucho más!



Músculo

Cuerpo completo

Segmentario

Obtén mediciones musculares tanto corporales completas como segmentadas, lo que permite detectar desequilibrios y ajustar el entrenamiento en consecuencia.



Obesidad

Cuerpo completo

Segmentario

Evalúa la grasa corporal utilizando múltiples indicadores clave. Además de la grasa corporal total, también recibirás resultados para las cuatro extremidades y el tronco, así como grasa visceral en la zona abdominal.



Análisis del Tipo de Cuerpo

Recibe una evaluación del equilibrio entre grasa corporal y masa muscular, con recomendaciones basadas en los resultados.



Seguimiento del Historial

Guarda y consulta tantos resultados como sea necesario, con comparación rápida con los resultados anteriores, lo que facilita el seguimiento de cambios y progresos.


¡El cable retráctil hace que el dispositivo sea fácil de usar tanto para niños como para adultos!




App Charder ProScan




¡Disfruta de una nueva y práctica forma de medir la composición corporal y seguir el progreso! La aplicación Charder ProScan está disponible para dispositivos iOS y Android, diseñada para proporcionar a los entrenadores la información necesaria para comprender el avance de sus clientes y acompañarlos en su camino hacia el bienestar.

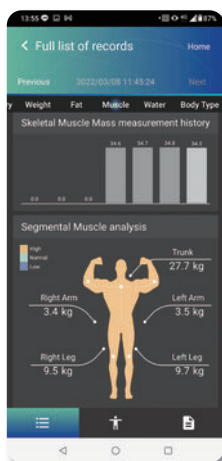

Resultados segmentados

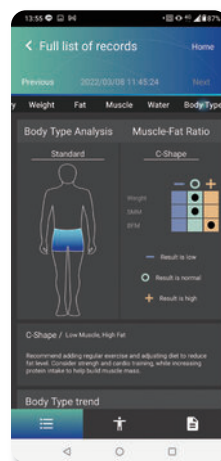

Análisis corporal

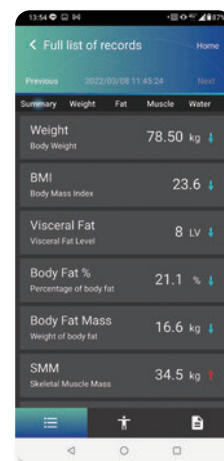

Resumen de resultados



Mejora la retención

Formula programas de entrenamiento basados en datos reales, utilizando los resultados de la composición corporal de cada cliente. ¡Cuantifica el progreso y obtén información útil basada en datos que demuestre la eficacia de tus programas de entrenamiento personalizado!



Registro automático de resultados

¡Despídete del papel y los errores de transcripción! Los resultados se transfieren de forma automática y sencilla a la aplicación Charder ProScan, lo que facilita el seguimiento de tendencias. ¡Envía los resultados a tus clientes con solo un clic!




Comparte los resultados

Envía fácilmente los resultados de las mediciones a tus clientes, permitiéndoles hacer un seguimiento del progreso que han logrado gracias a tus programas.



Ligero y portátil

El U310 está diseñado para ser liviano y fácil de transportar, ideal para profesionales que siempre están en movimiento. Con un peso de solo 2,2 kg, los entrenadores pueden ofrecer mediciones de calidad profesional en menos de 30 segundos.

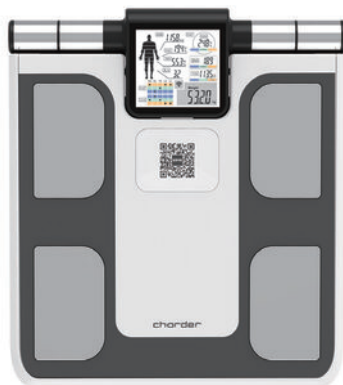

Bolsa de transporte (opcional)

U310 Analizador de Composición Corporal

Características

Análisis de Impedancia Bioeléctrica (BIA)	10 mediciones de impedancia: 2 frecuencias (5kHz, 50kHz) para 5 segmentos (brazo derecho, brazo izquierdo, tronco, pierna derecha, pierna izquierda)
Electrodos	Diseño de electrodos táctiles de 8 puntos
Pantalla	85 (V) x 80 (H) mm 3.3 (An) x 3.1 (Al)
Capacidad	0-200 kg ($\pm 1\%$)
Graduación	0-100 kg: incrementos de 0.05 kg 100-200 kg: incrementos de 0.1 kg
Edad Aplicable	De 6 a 85 años
Salida / Transmisión	Inalámbrica
Duración de la medición	Menos de 30 segundos
Dimensiones del dispositivo (aproximadas)	385 (L) x 350 (An) x 50.5 (Al) mm
Peso del dispositivo	Aproximadamente 2.2 kg
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente o 4 pilas AA
Accesorios	Bolsa de transporte AR-00103 (opcional)

Hoja de resultados

Análisis de Composición Corporal	Agua corporal total, masa ósea, peso
Análisis Muscular	Masa magra blanda, masa muscular esquelética
Análisis de Obesidad	Masa grasa, porcentaje de grasa corporal, índice de masa corporal (IMC), nivel de grasa visceral
Análisis Segmentario	Masa magra segmentaria, grasa corporal segmentaria
Análisis del Tipo de Cuerpo	Tasa metabólica basal, tipo de cuerpo, edad corporal, análisis del tipo de cuerpo
Unidades	Imperial, Métrico

Cód. 10087



SIBEL SAU

Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.

Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com

International Sales: Tel. +34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com

Servicio Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com

www.sibelmed.com