

# USB SIBELMED · stazione meteorologica

## Descrizione

La Stazione Meteorologica USB Sibelmed permette di misurare con estrema precisione i dati meteorologici di temperatura, pressione e umidità.

	Gamma	Precisione (%)
Temperatura (°C)	5 - 40	+/- 0,2
Pressione (hPa)	250 - 1060	+/- 1,5
Umidità (% HR)	10 - 90	+/- 2

La stazione meteorologica USB Sibelmed si collega alla porta USB del computer e invia i dati meteorologici in forma continuativa.

È compatibile con il software W20s e, pertanto, con tutti gli spirometri Sibelmed.

Il software preleva automaticamente i dati dalla stazione ogni volta che si realizza una spirometria o una taratura.

### Tecnologia Plug & Play.

Il software rileva automaticamente la stazione meteorologica, senza la necessità di installazione o configurazione.



### Portatile

Accessorio piccolo e leggero che dispone di una superficie magnetizzata che permette di collocarlo sulla superficie del computer.



### Rilievo di pressione, temperatura e umidità

Correzione BTPS automatica all'inizio di ciascuna prova/taratura.



### LED blu

Indica che la stazione meteorologica è in funzionamento.

### Non ha bisogno di pile

Alimentato con cavo USB.



### Compatibile

Con la versione 2.09 del software W20s e posteriori.



### Valido per il sistema operativo Windows

VISTA, 7, 8.1 e 10.



SIBEL S.A.U., Rosellón 500 bajos, 08026 BARCELONA (Spagna)  
Uff. vendite nazionali: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com  
International Sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com  
Servizio Tecnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com Fax: +34 93 436 16 11  
[www.sibelmed.com](http://www.sibelmed.com)



CE

EN 61010-1:2010

EN ISO 9001:2015




# Sibelmed®

# STAZIONE METEOROLOGICA USB SIBELMED



USB

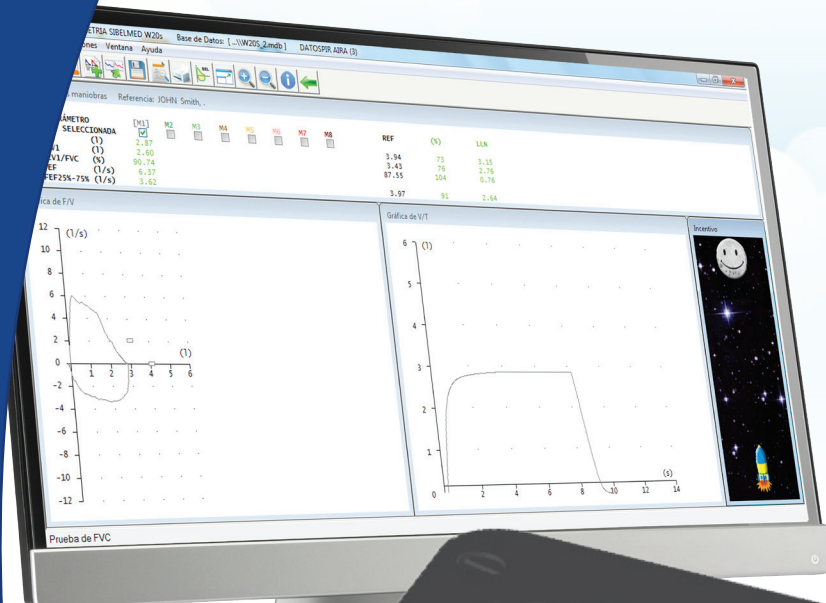

 34 x 70 x 12,5 mm.

 100 g



Temperatura



Pressione



Umidità

[www.sibelmed.com](http://www.sibelmed.com)